### VERSUCH 18

# Hochreine Germanium detektoren in der $\gamma$ - Spektrometrie

 $Katharina\ Br\"{a}gelmann\\ katharina.braegelmann@tu-dortmund.de$ 

Lars Kolk lars.kolk@tu-dortmund.de

Durchführung: 09.12.2019 Abgabe: 13.12.2019

TU Dortmund – Fakultät Physik

# Inhaltsverzeichnis


1	Auswertung					
	1.1	Energiekalibration	3			
	1.2	Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit	5			
	1.3	Monochromatisches <sup>137</sup> Cs-Spektrum	7			
Lit	teratı	ur	10			

Hier könnte Ihre Werbung stehen. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Hier könnte Ihre Werbung stehen.

### 1 Auswertung

#### 1.1 Energiekalibration

Die Energiekalibration wird anhand der Vermessung eines  $^{152}$ Eu-Spektrums (Abb. 1) durchgeführt. Die Messdaten werden mit Python 3.7.3 und den Biblitheken numpy, scipy und uncertainties ausgewertet. Ausgleichsrechnungen erfolgen mit scipy.optimize.curve\_fit. Über eine Peak-Picking-Funktion werden die größten Peaks in den Daten ausfindig gemacht und sind in Tabelle 1 notiert. Zum  $\gamma$ -Zerfall des  $^{152}$ Eu werden Literaturwer-

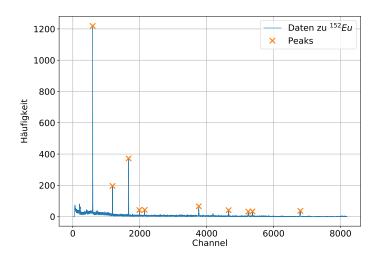

**Abbildung 1:** Das aufgenommene Spektrum über  $T=2134\,\mathrm{s}$  von  $^{152}$ Eu mit markierten Peaks. Dargestellt ist die Zählrate gegen den zugehörigen Channel des MCA.


te bezüglich der Emissionsenergien und der Emissionswahrscheinlichkeiten recherchiert [1]. Dabei werden zunächst die Emissionsenergien mit mindestens 1 % Emissionswahrscheinlichkeit rausgesucht. Diese sind in Tabelle 1 aufgeführt. Zur Kalibration werden die jeweiligen Daten auf den zugehörigen Wert des letzten sichtbaren Peaks normiert. Entsprechend werden folgende Rechnungen ausgeführt:

rel. Energie 
$$E_{\rm rel.} = \frac{E_{\rm Peak}}{E_{\rm Peak=9}}$$
rel. Channel 
$$Channel_{\rm rel.} = \frac{Channel}{Channel_{\rm Peak=9}}.$$

**Tabelle 1:** Parameter zu allen vermessenen Peaks des  $^{152}$ Eu-Spektrums.

Peak	Channel(Peak)	Counts	$E_{\gamma}$ / keV [1]	rel. Channel Channel	rel. Energie $E_{\gamma}$
				Channel(Peak 9)	$E_{\gamma}(\text{Peak }9)$
0	594	1219	121,7817	0,087	0,087
1	1187	196	244,6974	$0,\!175$	$0,\!174$
2	1667	372	$344,\!2785$	$0,\!245$	$0,\!245$
3	1988	42	$411,\!1165$	$0,\!292$	$0,\!292$
4	2149	43	443,965	0,316	0,315
5	3765	66	778,9045	$0,\!554$	$0,\!553$
6	4655	41	$964,\!079$	0,685	0,685
7	5245	32	$1085,\!837$	0,771	0,771
8	5371	33	1112,076	0,790	0,790
9	6801	37	1408,013	1,0	1,0

Die relativen Größen sind in Abbildung 2 gegen die Counts aufgetragen. Die drei Emissionsenergien, die im gemessenen Spektrum nicht als Peak ersichtlich sind und auch die geringsten Emissionswahrscheinlichkeiten aufweisen, werden aus den Daten der Literaturwerte entfernt. Anschließend werden die zugeordneten Energien der Peaks gegen die

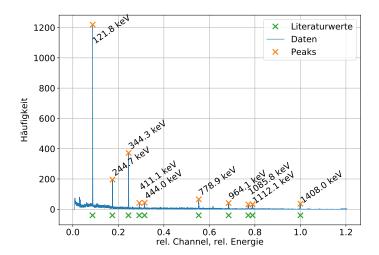


**Abbildung 2:** Die relativen Größen  $E_{\rm rel.}$  und Channel $_{\rm rel.}$ , normiert auf den letzten sichtbaren Peak des  $^{152}$ Eu-Spektrums, sind gegen die zugehörigen Counts aufgetragen. Die Peaks lassen sich nun den Spektrallinien des  $^{152}$ Eu zuordnen.

Channel der Peaks geplottet (Abbildung 3) und es wird eine lineare Regression der Form

$$E = m \cdot \text{Channel} + n \tag{1}$$

durchgeführt. Als Parameter der Regression ergeben sich über curve\_fit:

$$m = (0.20726 \pm 0.00004) \text{ keV/Channel}$$
  $n = (-1.22 \pm 0.17) \text{ keV}$ 

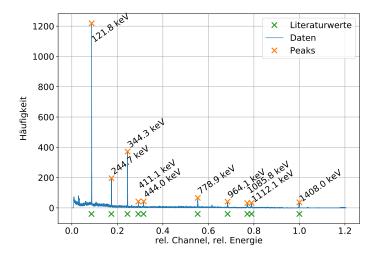

**Abbildung 3:** Ausgleichsrechnung über den Zusammenhang der Channel des MCA und der Energien der  $\gamma$ -Teilchen.

#### 1.2 Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit

Zur Bestimmung der Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit Q (engl.: efficiency) des Detektors wird zunächst die Aktivität der Probe ausgerechnet. Zwischen dem angegebenen Herstellungsdatum (01.10.2000) [2] der  $^{152}$ Eu-Probe und dem Versuchstag (09.12.2019) sind  $t=(605\,484\,000\pm54\,000)$ s vergangen. Die Halbwertszeit des Isotops beträgt  $T_{1/2}=(426,7\pm0,5)\cdot10^6$ s [1]. Mit der Anfangsaktivität  $A_0=(4130\pm60)$  Bq ergibt sich über

$$A = A_0 \exp\left(-\frac{\ln(2)}{T_{1/2}}t\right) = (1545 \pm 29)\frac{1}{s}$$
 (2)

die aktuelle Aktivität der Probe. Weiterhin wird der eingenommene Raumwinkel des Detektors benötigt. Dabei wird der Raumwinkel über die Geometrie eines Kegels berechnet:


$$\frac{r}{h} = \tan\left(\varphi/2\right) \Leftrightarrow \varphi = 2\arctan\left(\frac{r}{h}\right)$$
$$\frac{\varOmega}{4\pi} = \sin^2\frac{\varphi}{2\cdot 4} = \sin^2\left(\frac{1}{4}\arctan\left(r/h\right)\right) = 0,0069\,\mathrm{sr}.$$

Die eingesetzten Größen für den Radius der Detektoroberfläche und Höhe des Kegels sind  $r = 22.5 \cdot 10^{-3}$  m und  $h = 80 \cdot 10^{-3}$  m. Die gesamte Messzeit des <sup>152</sup>Eu-Spektrums

beträgt T = 2134 s. Damit kann nun Q wie folgt berechnet werden:

$$Q = \frac{4\pi}{\Omega} \frac{N_{\text{Peakinhalt}}}{ATP_{E_{\gamma}}}.$$
 (3)

 $P_{E_{\gamma}}$  ist hier die Emissionswahrscheinlichkeit einer  $\gamma$ -Energie [1]. Der Parameter  $N_{\text{Peakinhalt}}$  beschreibt nun die gesamte Zahl der Counts, die sich in einem Peak befindet. Zur Berechnung der Peakinhalte werden die Peaks einzeln betrachtet und die Messdaten passend zu der erwarteten Gaußverteilung eines Peaks abgeschnitten (vgl. Abb. 4). Die Inhalte der

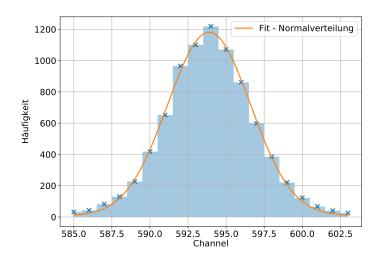


**Abbildung 4:** Vergrößerung des ersten Peaks mit Ausgleichsfunktion einer Gaußkurve zur Veranschaulichung der Gaußpeaks.

Peaks werden durch Aufsummation der Counts im jeweiligen angepassten Datenbereich berechnet. Die Ergebnisse zu den jeweiligen Peaks sind in Tabelle 2 notiert. Nun wird Q gegen die Energie E des jeweiligen Peaks aufgetragen. Es wird eine Ausgleichsrechnung der Form  $Q = aE^b + c$  durchgeführt. Die Parameter der Ausgleichsrechnung betragen:

$$a = (0.113 \pm 0.055) \, \frac{1}{\mathrm{keV}}, \qquad b = (-0.36 \pm 0.17) \, , \qquad c = (-0.0077 \pm 0.0059) \, .$$

**Tabelle 2:** Parameter zur Berechnung der Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit anhand eines  $^{152}$ Eu-Spektrums. Weitere verwendete Größen sind:  $A=(1545\pm29)/\mathrm{s},\,\frac{\varOmega}{4\pi}=0,0069\,\mathrm{sr},\,T=2134\,\mathrm{s}.$ 

F / l <sub>2</sub> oV [1]	P [1]	D	Q in $10^{-3}$
$E_{\gamma} / \text{keV } [1]$	1 [1]	$P_{\mathrm{Peakinhalt}}$	Q III 10
121,7817	$28,\!41$	$(8233 \pm 91)$	$(12,\!70\pm0,\!24)$
244,6974	$7,\!55$	$(1515 \pm 39)$	$(8,79 \pm 0,16)$
$344,\!2785$	$26,\!59$	$(3152 \pm 56)$	$(5,19 \pm 0,10)$
$411,\!1165$	2,238	$(324 \pm 18)$	$(6,\!34\pm0,\!12)$
443,965	2,80	$(367 \pm 19)$	$(5,74 \pm 0,11)$
778,9045	12,97	$(741 \pm 27)$	$(2,\!50\pm0,\!05)$
964,079	$14,\!50$	$(596 \pm 24)$	$(1,\!80 \pm 0,\!33)$
$1085,\!837$	10,13	$(403 \pm 20)$	$(1,74 \pm 0,32)$
1112,076	$13,\!41$	$(502\pm22)$	$(1,\!64 \pm 0,\!30)$
1408,013	20,85	$(586 \pm 24)$	$(1,\!23\pm0,\!23)$

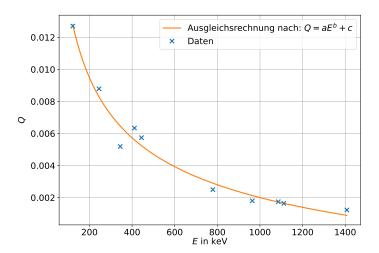


**Abbildung 5:** Ausgleichsrechnung zur Bestimmung der Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit Q. Die Fehlerbereiche verschwinden hinter den Datenpunkten und sind zur Übersichtlichkeit nicht aufgeführt.

## 1.3 Monochromatisches $^{137}\mathrm{Cs}\text{-Spektrum}$

In Abbildung 6 ist das volle Spektrum des <sup>137</sup>Cs-Strahlers abgebildet. Der Photopeak wird über eine Peak-Picking-Funktion ermittelt. Dieser ist vergrößert in Abbildung 7 abgebildet. An den Peak wird eine Gaußverteilung nach

$$f(E) = \frac{a}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \ \exp\left(-\frac{(E-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) + b$$

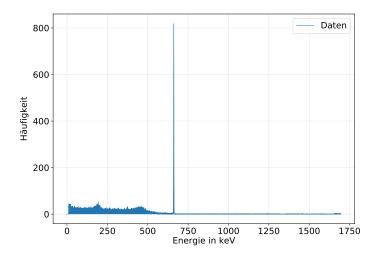

**Abbildung 6:** Volles aufgenommenes Spektrum des  $^{137}$ Cs-Strahlers.

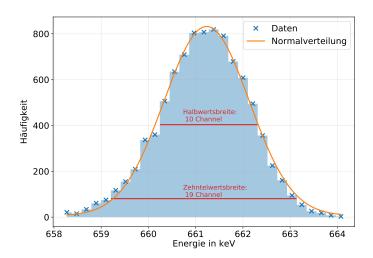


Abbildung 7: Vergrößerter Photopeak des <sup>137</sup>Cs-Strahlers.

gefittet. Hierzu wird der augewertete Datenbereich angepasst. Die Parameter der Ausgleichsrechnung ergeben sich zu

$$\mu = (661, 2327 \pm 0,0051) \, \mathrm{keV} \quad \sigma = (0,9023 \pm 0,0051) \, \mathrm{keV} \quad a = (1868 \pm 9) \, \mathrm{keV}^2 \quad b = (6,1 \pm 0,1) \, \mathrm{keV}.$$

Für den Inhalt des Photopeaks werden die Counts im geplotteten Bereich aufsummiert. Der Inhalt beträgt:


$$N_{\rm Peak} = (9174 \pm 96)$$
 .

Die Halbwertsbreite (FWHM) und die Zehntelwertsbreite (FWTM) werden zu folgenden Daten ausgemessen, indem die Energie bei der Hälfte bzw einem Zehntel der Counts aus den Messdaten bestimmt wird:

$$\begin{array}{lll} \mathrm{FWHM}_{\mathrm{Daten}} & = & 2,07\,\mathrm{keV} \\ \mathrm{FWTM}_{\mathrm{Daten}} & = & 3,94\,\mathrm{keV} \\ & & \\ \overline{\mathrm{FWHM}}_{\mathrm{Daten}} & = & 0,53\,. \end{array}$$

Aus der Standardabweichung  $\sigma$  lässt sich ein Vergleichswert passend zur gefitteten Gaußverteilung finden:

$$\begin{array}{lll} \mathrm{FWHM_{Fit}} & = & 2\sqrt{2\log{(2)}}\sigma = 2{,}13\,\mathrm{keV} \\ \mathrm{FWTM_{Fit}} & = & 2\sqrt{2\log{(10)}}\sigma = 3{,}87\,\mathrm{keV} \\ \frac{\mathrm{FWHM_{Fit}}}{\mathrm{FWTM_{Fit}}} & = & 0{,}55\,\mathrm{.} \end{array}$$

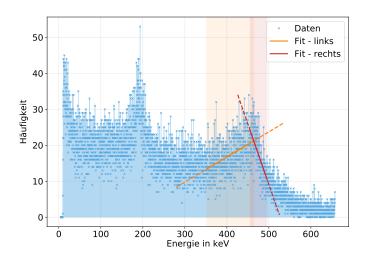

**Abbildung 8:** Vergrößertes Compton-Kontiunuum des  $^{137}$ Cs-Strahlers mit linearen Ausgleichsrechnungen zur Identifitkation der Lage der Compton-Kante.

#### Suche

• Energie des Strahlers (Photo-Energie -> Gauss fitten? mu entspricht dann dem Channel und der Channel einer Energie)

• Fit:

$$f(x) = \frac{a}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) + b$$

• Parameter

$$\mu = (661,2327 \pm 0,0051) \text{ keV}$$
  $\sigma = (0,9023 \pm 0,0051) \text{ keV}$   $a = (1868 \pm 9)$   $b = (6,1 \pm 0,1)$ 

- Halbwertsbreite fitten
- Zehntelwertsbreite fitten, FWHM/FWTM(Theorie)=0.5486620049392714, in den Daten: FWHM/FWTM=0.5486620049392715

•

$$FWHM = 10$$
  $FWTM = 19$ 

• Comptonkante ausmessen, bei:

$$E = (4.6 \pm 0.4) \cdot 10^2 \,\text{keV}$$

• mit den Parametern

$$\begin{array}{c} links & rechts \\ a = (0.0699 \pm 0.0058) \, \frac{1}{\mathrm{keV}} & a = (-0.337 \pm 0.027) \, \frac{1}{\mathrm{keV}} \\ b = (-11.3 \pm 2.4) & b = (178 \pm 13) \end{array}$$

- Theorie liegt bei  $E_{\rm Kante} = (477,\!3340 \pm 0,\!0028)\,{\rm keV}$
- Rückstreulinie ausmessen über Geradenschnittpunkt in Rückstreulinie
- Inhalte des Peaks und des Compton-Kontinuums ausmessen (aufsummieren, aaaaber... Anleitung!)

#### Literatur

- [1] Laboratoire National Henri Becquerel.  $^{152}Eu$  Emissions and decay scheme. 2019. URL: http://www.nucleide.org/Laraweb/index.php.
- [2] TU Dortmund. In: Versuchsanleitung V18 Hochreine Germanium detektoren in der  $\gamma$ -Spektrometrie.