## VERSUCH 18

# Hochreine Germanium detektoren in der $\gamma$ - Spektrometrie

 $Katharina\ Br\"{a}gelmann\\ katharina.braegelmann@tu-dortmund.de$ 

Lars Kolk lars.kolk@tu-dortmund.de

Durchführung: 09.12.2019 Abgabe: 13.12.2019

TU Dortmund – Fakultät Physik

## Inhaltsverzeichnis


1 Auswertung					
	1.1	Energiekalibration	3		
		Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit			
	1.3	Monochromatisches <sup>137</sup> Cs-Spektrum	8		
	1.4	Aktivität von Barium	13		
	1.5	Bestimmung der Bestandteile einer Probe aus Bananenchips	14		
1:4			15		
LII	teratı	ır	13		

Hier könnte Ihre Werbung stehen. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Hier könnte Ihre Werbung stehen.

## 1 Auswertung

#### 1.1 Energiekalibration

Die Energiekalibration wird anhand der Vermessung eines  $^{152}$ Eu-Spektrums (Abb. 1) durchgeführt. Die Messdaten werden mit Python 3.7.3 und den Biblitheken numpy, scipy und uncertainties ausgewertet. Ausgleichsrechnungen erfolgen mit  $scipy.optimize.curve\_fit$ . Über eine Peak-Picking-Funktion werden die größten Peaks in den Daten ausfindig gemacht und sind in Tabelle 1 notiert. Zum  $\gamma$ -Zerfall des  $^{152}$ Eu

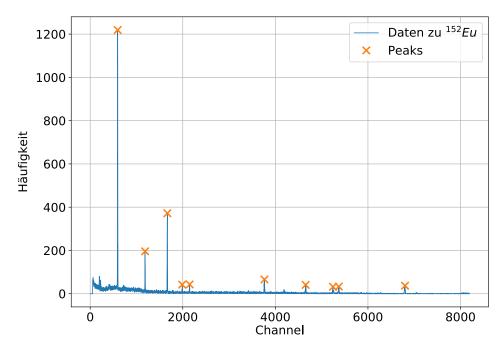

**Abbildung 1:** Das aufgenommene Spektrum über  $T=2134\,\mathrm{s}$  von  $^{152}$ Eu mit markierten Peaks. Dargestellt ist die Zählrate gegen den zugehörigen Channel des MCA.

werden Literaturwerte bezüglich der Emissionsenergien und der Emissionswahrscheinlichkeiten recherchiert [1]. Dabei werden zunächst die Emissionsenergien mit mindestens 1 % Emissionswahrscheinlichkeit rausgesucht. Diese sind in Tabelle 1 aufgeführt. Zur Kalibration werden die jeweiligen Daten auf den zugehörigen Wert des letzten sichtbaren

**Tabelle 1:** Parameter zu allen vermessenen Peaks des <sup>152</sup>Eu-Spektrums.

Peak	Channel(Peak)	Counts	$E_{\gamma} / \text{ keV } [1]$	rel. Channel	rel. Energie
			,	Channel	$E_{\gamma}$
				Channel(Peak 9)	$E_{\gamma}(\text{Peak }9)$
0	594	1219	121,7817	0,087	0,087
1	1187	196	244,6974	$0,\!175$	$0,\!174$
2	1667	372	$344,\!2785$	$0,\!245$	$0,\!245$
3	1988	42	$411,\!1165$	$0,\!292$	$0,\!292$
4	2149	43	443,965	0,316	0,315
5	3765	66	778,9045	$0,\!554$	$0,\!553$
6	4655	41	964,079	0,685	0,685
7	5245	32	$1085,\!837$	0,771	0,771
8	5371	33	1112,076	0,790	0,790
9	6801	37	1408,013	1,0	1,0

Peaks normiert. Entsprechend werden folgende Rechnungen ausgeführt:


rel. Energie 
$$E_{\rm rel.} = \frac{E_{\rm Peak}}{E({\rm Peak=9})}$$
rel. Channel 
$${\rm Channel}_{\rm rel.} = \frac{{\rm Channel}}{{\rm Channel}({\rm Peak=9})}.$$

Die relativen Größen sind in Abbildung 2 gegen die Counts aufgetragen. Die drei Emissionsenergien, die im gemessenen Spektrum nicht als Peak ersichtlich sind und auch die geringsten Emissionswahrscheinlichkeiten aufweisen, werden aus den Daten der Literaturwerte entfernt. Anschließend werden die zugeordneten Energien der Peaks gegen die Channel der Peaks geplottet (Abbildung 3) und es wird eine lineare Regression der Form

$$E = m \cdot \text{Channel} + n \tag{1}$$

durchgeführt. Als Parameter der Regression ergeben sich über curve\_fit:

$$m = (0.20726 \pm 0.00004) \text{ keV/Channel},$$
  $n = (-1.22 \pm 0.17) \text{ keV}.$ 

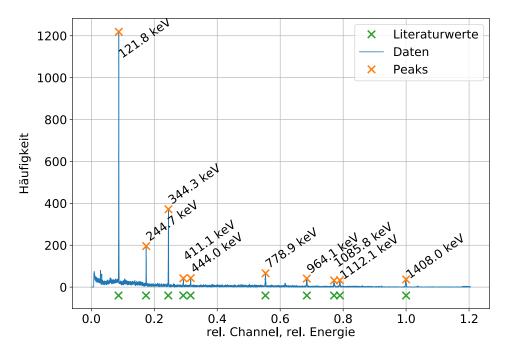

**Abbildung 2:** Die relativen Größen  $E_{\rm rel.}$  und Channel $_{\rm rel.}$ , normiert auf den letzten sichtbaren Peak des  $^{152}$ Eu-Spektrums, sind gegen die zugehörigen Counts aufgetragen. Die Peaks lassen sich nun den Spektrallinien des  $^{152}$ Eu zuordnen.

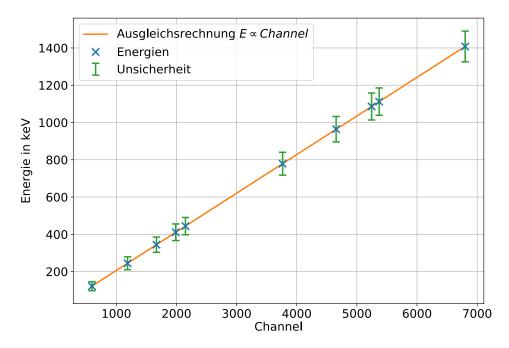


Abbildung 3: Ausgleichsrechnung über den Zusammenhang der Channel des MCA und der Energien der  $\gamma$ -Teilchen.

#### 1.2 Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit


Zur Bestimmung der Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit Q (engl.: efficiency) des Detektors wird zunächst die Aktivität der Probe ausgerechnet. Zwischen dem angegebenen Herstellungsdatum (01.10.2000) [2] der  $^{152}$ Eu-Probe und dem Versuchstag (09.12.2019) sind  $t=(605\,484\,000\pm54\,000)$ s vergangen. Die Halbwertszeit des Isotops beträgt  $T_{1/2}=(426,7\pm0,5)\cdot10^6$ s [1]. Mit der Anfangsaktivität  $A_0=(4130\pm60)$  Bq ergibt sich über

$$A = A_0 \exp\left(-\frac{\ln{(2)}}{T_{1/2}}t\right) = (1545 \pm 29) \frac{1}{\mathrm{s}}$$

die aktuelle Aktivität der Probe. Weiterhin wird der eingenommene Raumwinkel des Detektors benötigt. Dabei wird der Raumwinkel über die Geometrie eines Kegels berechnet:

$$\begin{split} \frac{r}{h} &= \tan{(\varphi/2)} \Leftrightarrow \varphi = 2\arctan{(\frac{r}{h})} \\ \frac{\varOmega}{4\pi} &= \sin^2{\frac{\varphi}{2\cdot 4}} = \sin^2{\left(\frac{1}{4}\arctan{(r/h)}\right)} = 0,\!0069\,\mathrm{sr}. \end{split}$$

Die eingesetzten Größen für den Radius der Detektoroberfläche und Höhe des Kegels sind  $r=22,5\cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}$  und  $h=80\cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}$ . Die gesamte Messzeit des  $^{152}$ Eu-Spektrums beträgt  $T=2134\,\mathrm{s}$ . Damit kann nun Q nun über Gleichung (??) berechnet werden. Zur Berechnung der Peakinhalte werden die Peaks einzeln betrachtet und die Messdaten passend zu der erwarteten Gaußverteilung eines Peaks abgeschnitten (vgl. Abb. 4). Die Inhalte der

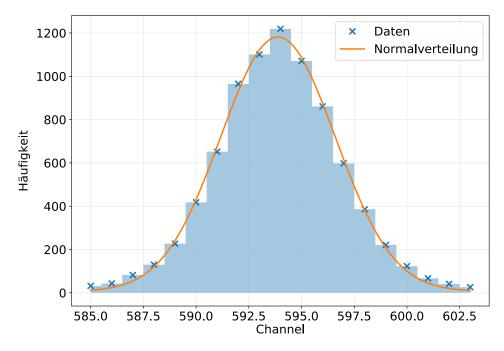


**Abbildung 4:** Vergrößerung des ersten Peaks mit Ausgleichsfunktion einer Gaußkurve zur Veranschaulichung der Gaußpeaks.

Peaks werden durch Aufsummation der Counts im jeweiligen angepassten Datenbereich berechnet. Die Ergebnisse zu den jeweiligen Peaks sind in Tabelle 2 notiert. Nun wird Q

**Tabelle 2:** Parameter zur Berechnung der Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit anhand eines  $^{152}$ Eu-Spektrums. Weitere verwendete Größen sind:  $A=(1545\pm29)/\mathrm{s},\,\frac{\varOmega}{4\pi}=0,\!0069\,\mathrm{sr},\,T=2134\,\mathrm{s}.$ 

$E_{\gamma}$ / keV [1]	P [1]	$P_{\text{Peakinhalt}}$	Q in $10^{-3}$
121,7817	28,41	$(8233 \pm 91)$	$(12,70 \pm 0,24)$
244,6974	$7,\!55$	$(1515 \pm 39)$	$(8,79 \pm 0,16)$
$344,\!2785$	$26,\!59$	$(3152 \pm 56)$	$(5,19 \pm 0,10)$
$411,\!1165$	2,238	$(324 \pm 18)$	$(6,\!34\pm0,\!12)$
443,965	2,80	$(367 \pm 19)$	$(5,74 \pm 0,11)$
778,9045	12,97	$(741 \pm 27)$	$(2,\!50\pm0,\!05)$
964,079	14,50	$(596 \pm 24)$	$(1,\!80 \pm 0,\!33)$
$1085,\!837$	10,13	$(403 \pm 20)$	$(1,74 \pm 0,32)$
1112,076	$13,\!41$	$(502 \pm 22)$	$(1,64 \pm 0,30)$
1408,013	20,85	$(586 \pm 24)$	$(1,\!23\pm0,\!23)$

gegen die Energie E des jeweiligen Peaks aufgetragen. Es wird eine Ausgleichsrechnung der Form  $Q = aE^b + c$  durchgeführt. Die Parameter der Ausgleichsrechnung betragen:

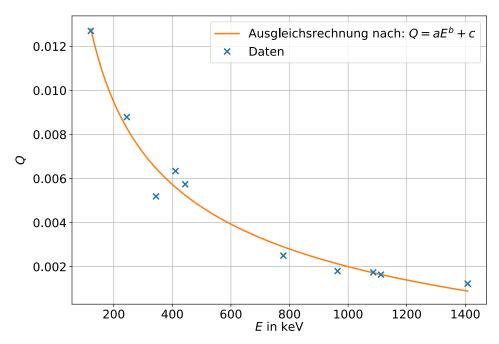

**Abbildung 5:** Ausgleichsrechnung zur Bestimmung der Vollenergienachweiswahrscheinlichkeit Q. Die Fehlerbereiche verschwinden hinter den Datenpunkten und sind zur Übersichtlichkeit nicht aufgeführt.

$$a = (0.113 \pm 0.055) \frac{1}{\text{keV}}, \qquad b = (-0.36 \pm 0.17), \qquad c = (-0.0077 \pm 0.0059).$$

## 1.3 Monochromatisches <sup>137</sup>Cs-Spektrum

In Abbildung 6 ist das volle Spektrum des <sup>137</sup>Cs-Strahlers abgebildet. Der Photopeak

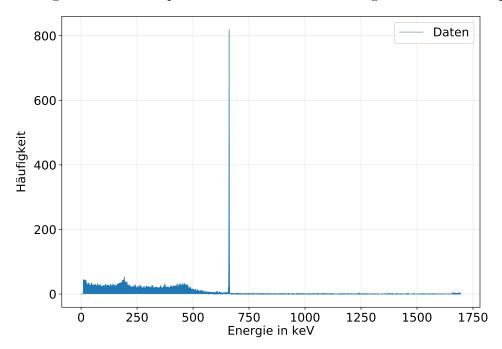


Abbildung 6: Volles aufgenommenes Spektrum des <sup>137</sup>Cs-Strahlers.

wird über eine Peak-Picking-Funktion ermittelt. Dieser ist vergrößert in Abbildung 7 abgebildet. An den Peak wird eine Gaußverteilung nach

$$f(E) = \frac{a}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \ \exp\left(-\frac{(E-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) + b$$

gefittet. Hierzu wird der augewertete Datenbereich angepasst. Die Parameter der Ausgleichsrechnung ergeben sich zu


$$\mu = (661,2327 \pm 0,0051) \text{ keV}, \qquad \sigma = (0,9023 \pm 0,0051) \text{ keV},$$
  
$$a = (1868 \pm 9) \text{ keV}^2, \qquad b = (6.1 \pm 0.1) \text{ keV}.$$

Dabei entspricht der Mittelwert  $\mu$  der Energie der Photolinie:

$$\Rightarrow \mu = E_{\text{Photo, Data}} = (661,2327 \pm 0,0051) \,\text{keV}.$$

Ein Literaturwert [1] zum Photopeak findet sich zu

$$E_{\text{Photo, Theo}} = (661,657 \pm 0,003) \text{ keV}.$$

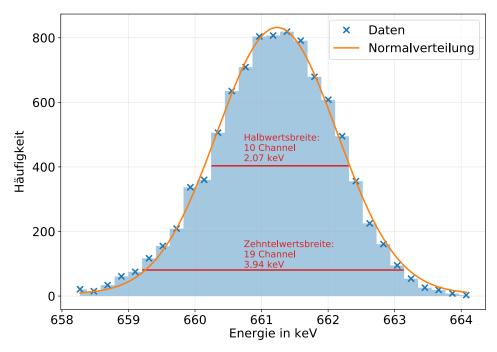

**Abbildung 7:** Vergrößerter Photopeak des  $^{137}\mathrm{Cs\text{-}Strahlers}.$ 

Für den Inhalt des Photopeaks werden die Counts im geplotteten Bereich aufsummiert. Der Inhalt beträgt:

$$N_{\rm Photo} = (9174 \pm 96) \,. \label{eq:NPhoto}$$


Die Halbwertsbreite (FWHM) und die Zehntelwertsbreite (FWTM) werden zu folgenden Daten ausgemessen, indem die Energie bei der Hälfte bzw einem Zehntel der Counts aus den Messdaten bestimmt wird:

$$\begin{split} \mathrm{FWHM_{Daten}} &= 2{,}07\,\mathrm{keV} \\ \mathrm{FWTM_{Daten}} &= 3{,}94\,\mathrm{keV} \\ \frac{\mathrm{FWHM_{Daten}}}{\mathrm{FWTM_{Daten}}} &= 0{,}53\,\mathrm{.} \end{split}$$

Aus der Standardabweichung  $\sigma$  lässt sich ein Vergleichswert passend zur gefitteten Gaußverteilung finden:

$$\begin{split} \mathrm{FWHM}_{\mathrm{Fit}} & = 2\sigma\,\sqrt{2\,\mathrm{ln}\,(2)} & = 2,\!13\,\mathrm{keV} \\ \mathrm{FWTM}_{\mathrm{Fit}} & = 2\sigma\,\sqrt{2\,\mathrm{ln}\,(10)} & = 3,\!87\,\mathrm{keV} \\ \frac{\mathrm{FWHM}_{\mathrm{Fit}}}{\mathrm{FWTM}_{\mathrm{Fit}}} & = 0,\!55\,. \end{split}$$

In Abbildung 8 ist das Compton-Kontinuum des Spektrums vergrößert dargestellt. Über

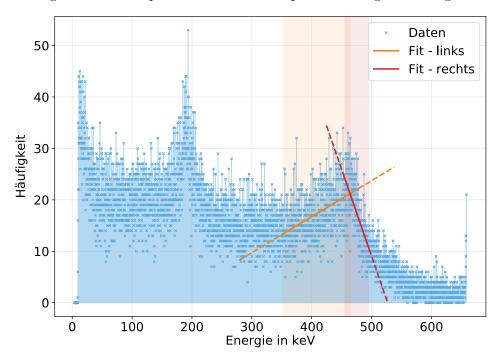

**Abbildung 8:** Vergrößertes Compton-Kontinuum des <sup>137</sup>Cs-Strahlers mit linearen Ausgleichsrechnungen zur Identifitkation der Lage der Compton-Kante.

den Schnittpunkt zweier Ausgleichsgeraden der Form  $y=a\cdot E+b$  wird die Lage der Compton-Kante angenähert. Die Parameter der Geraden ergeben sich zu

links: 
$$a = (0,0699 \pm 0,0058) \, \frac{1}{\text{keV}}, \qquad b = (-11,3 \pm 2,4) \, ,$$
 rechts: 
$$a = (-0,152 \pm 0,017) \, \frac{1}{\text{keV}}, \qquad b = (89 \pm 8) \, .$$

Der Schnittpunkt, entsprechend die Compton-Kante, liegt über Gleichsetzen der Geradengleichungen bei

$$E_{\text{Compton, Data}} = (450 \pm 5) \,\text{keV}.$$


Aus Gleichung (??) folgt für die Compton-Kante folgender theoretischer Wert:

$$E_{\text{Compton, Theo}} = (477,3340 \pm 0,0028) \text{ keV}.$$

Der Inhalt des Compton-Kontinuums als Summation der betreffenden Kanalinhalte bis zur Compton-Kante beträgt

$$N_{\rm Kontinuum} = \left(40\,797 \pm 202\right).$$

Der Rückstreupeak wird erneut durch das Anpassen zweier Geraden an beide Flanken des Peaks ermittelt (Abb. 9). Die Parameter beider Geradengleichungen lauten:

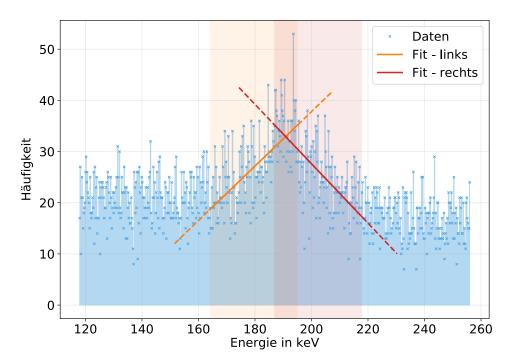

**Abbildung 9:** Vergrößerter Bereich des Compton-Kontinuums um den Rückstreupeak des  $^{137}$ Cs-Strahlers mit linearen Ausgleichsrechnungen zur Identifitkation der Lage des Rückstreupeaks.

links: 
$$a = (0.532 \pm 0.051) \, \frac{1}{\mathrm{keV}}, \qquad \qquad b = (-69 \pm 9) \, ,$$
 rechts: 
$$a = (-0.580 \pm 0.052) \, \frac{1}{\mathrm{keV}}, \qquad \qquad b = (144 \pm 11) \, .$$

Der Rückstreupeak entspricht dem Schnittpunkt beider Geraden und liegt bei


$$E_{\rm R\ddot{u}ck,\;Data} = (191 \pm 18)\,{\rm keV}.$$

Der entsprechende Vergleichswert errechnet sich aus Gleichung (??) mit  $\theta = 90^{\circ}$  zu

$$E_{\rm R\ddot{u}ck,\ Theo} = (242.1 \pm 1.1)\,{\rm keV}. \label{eq:error}$$

Der Extinktionskoeffizient, oder auch Absorptionskoeffizient  $\mu$ , lässt sich aus Abbildung 10 ablesen. Für die jeweiligen Wechselwirkungen und die zugehörigen Energien werden folgende Absorptionskoeffizienten  $\mu$  abgelesen:

$$E_{\rm Data} \qquad \qquad \mu \\ {\rm Photo:} \; (661{,}2327 \pm 0{,}0051) \, {\rm keV} \qquad \qquad (0{,}004 \, 35 \pm 0{,}000 \, 10) \, {\rm cm}^{-1} \\ {\rm Compton:} \; (450 \pm 5) \, {\rm keV} \qquad \qquad (0{,}40 \pm 0{,}01) \, {\rm cm}^{-1}.$$

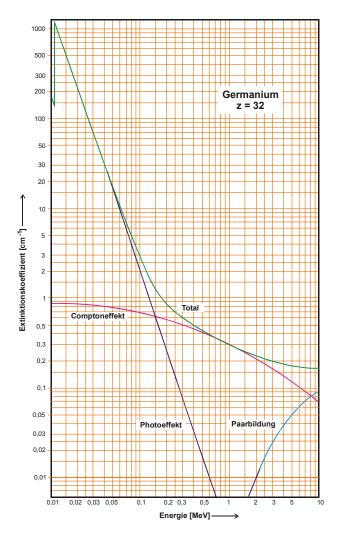

**Abbildung 10:** Verlauf von  $\mu$  gegen die  $\gamma$ -Energie aufgetragen [3].

Über die Absorberdicke (maximale Detektordicke)  $d=39\,\mathrm{mm}$  und Gleichung (??) ergeben sich die Wechselwirkungswahrscheinlichkeiten

Photo: 
$$P = (1.68 \pm 0.04) \%$$
  
Compton:  $P = (79.0 \pm 0.8) \%$ .

Das Verhältnis der Wechselwirkungswahrscheinlichkeiten berechnet sich zu:


$$\frac{P_{\rm Photo}}{P_{\rm Compton}} = (47.0 \pm 1.2) \, . \label{eq:Photo}$$

Das Verhältnis der Inhalte des Photopeaks und des Compton-Kontinuums gibt ebenfalls

Auskunft über das Verhältnis der Wechselwirkungswahrscheinlichkeiten:

$$\frac{N_{\rm Photo}}{N_{\rm Kontinuum}} = (4.45 \pm 0.05) \, . \label{eq:N_Photo}$$

#### 1.4 Aktivität von Barium

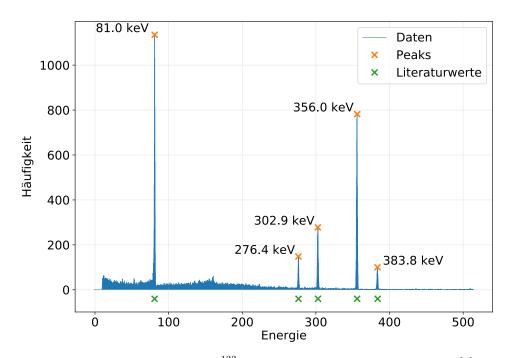

**Abbildung 11:** Spektrum des <sup>133</sup>Ba mit zugeordneten Literaturwerten [1].

In Abbildung 11 ist das Spektrum zum <sup>133</sup>Ba dargestellt. Die Peaks werden mithilfe einer Peak-Picking-Funktion ermittelt. Die Literaturwerte zum Barium [1] sind in Tabelle 3 aufgeführt. Die Werte sind ebenfalls in Abbildung 11 abgebildet.

Nun wird die Aktivität der Probe zur Zeit der Messung bestimmt. Hierzu werden die einzelnen Peaks genauer betrachtet, passende Bereiche der Gaußpeaks gewählt und die Inhalte der einzelnen Peaks werden berechnet. Die Energien der einzelnen Peaks  $E_{\gamma}$ , die Emissionswahrscheinlichkeit P, die Peakinhalte  $N_{\rm Peakinhalt}$  sind in Tabelle 3 notiert. Über die Ausgleichsrechnung aus Kapitel 1.2 werden aus den Energien die Vollenergienachweiswahrscheinlichkeiten Q berechnet. Die Gleichung (??) wird nach der Aktivität A umgestellt und so für jeden Peak eine Aktivität bestimmt. Anschließend wird eine finale Aktivität bestimmt, indem die einzelnen Aktivitäten gemittelt werden:

$$A = (1077 \pm 12) \, \frac{1}{\text{s}}.$$

**Tabelle 3:** Parameter zur Berechnung der Aktivität anhand eines  $^{133}$ Ba-Spektrums. Weitere verwendete Größen sind:  $\frac{\varOmega}{4\pi}=0{,}0069\,\mathrm{sr},\,T=2347\,\mathrm{s}.$ 

$E_{\gamma}$ / keV [1]	P [1]	$P_{\mathrm{Peakinhalt}}$	Q in $10^{-3}$	A in $Bq$
81,0579	33,31	$(7173 \pm 85)$	15,52	$(854 \pm 10)$
$276,\!2951$	7,13	$(1099 \pm 33)$	$7,\!23$	$(1311\pm40)$
$302,\!6169$	18,31	$(2290\pm48)$	6,75	$(1140\pm24)$
$356,\!0896$	62,05	$(6207 \pm 79)$	5,93	$(1038\pm13)$
$383,\!6549$	8,94	$(845 \pm 29)$	$5,\!57$	$(1044\pm36)$

### 1.5 Bestimmung der Bestandteile einer Probe aus Bananenchips

Das vollständige Spektrum der Probe ist in Abbildung 12 abgebildet. Nun werden die


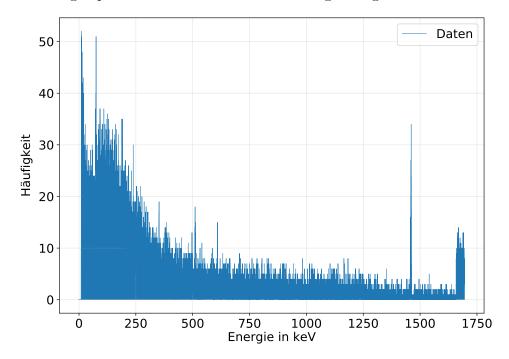


Abbildung 12: Spektrum der Probe von Bananenchips.

Peaks mithilfe einer Peak-Picking-Funktion ausfindig gemacht. Anschließend werden zu den Energien der prominentesten Peaks über Quelle [1] mögliche Isotope gesucht.  $^{40}$ K hat zwei  $\gamma$ -Zerfälle mit signifikanter Emissionswahrscheinlichkeit. Dabei lässt sich  $^{40}$ K

zwei gemessenen Spektrallinien zuordnen (Abb. 13):

gemessene Linie: Literaturwert [1]:  $1460,9832 \,\mathrm{keV}$   $1460,822 \,\mathrm{keV}$   $510,7042 \,\mathrm{keV}$   $511 \,\mathrm{keV}.$ 

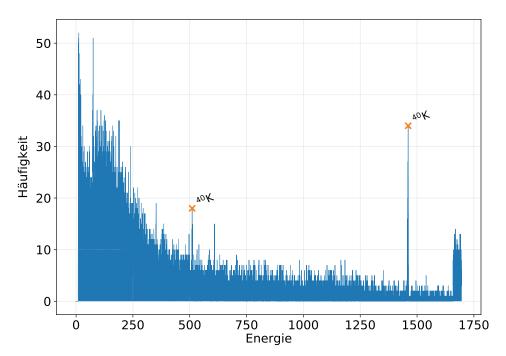

**Abbildung 13:** Spektrum der Probe mit Markierung der eindeutig identifizierbaren Isotope [1].

## Literatur

- [1] Laboratoire National Henri Becquerel. <sup>152</sup>Eu Emissions and decay scheme. 2019. URL: http://www.nucleide.org/Laraweb/index.php.
- [2] TU Dortmund. In: Versuchsanleitung V18 Hochreine Germaniumdetektoren in der  $\gamma$ -Spektrometrie.
- [3] TU Dortmund. In: Versuchsan leitung V704 - Absorption von  $\gamma\text{-}$  und  $\beta\text{-}Strahlung.$