VERSUCH 64

Moderne Interferometrie

 $Katharina\ Br\"{a}gelmann\\ katharina.braegelmann@tu-dortmund.de$

Lars Kolk lars.kolk@tu-dortmund.de

Durchführung: 06.01.2020 Abgabe: 13.01.2020

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung					
2	The 2.1 2.2 2.3 2.4	Allgemeines zu Interferenz und Kohärenz	3 5			
3	Aufbau und Durchführung des Versuchs					
	3.1	Grundsätzliches Konzept des Aufbaus	6			
	3.2	Durchführung und zugehöriger Aufbau der Messreihen	8			
4	Auswertung					
	4.1	Messung des Kontrasts	9			
	4.2	Bestimmung des Brechungsindex von Glas	11			
	4.3	Bestimmung des Brechungsindex von Luft	11			
5	Disk	kussion	17			
Lit	teratı	ur	17			

1 Zielsetzung

Das Ziel des Versuchs ist es, ein Sagnac-Interferometer zu justieren und verschiedene Größen damit auszumessen. Zuerst wird der Kontrast des Interferometers untersucht, anschließend werden die Brechungsindices von Glas und von Luft bestimmt. Das Sagnac-Interferometer zeichnet sich gegenüber anderen Interferometern dadurch aus, dass die beiden interferierenden Strahlen den gleichen Weg in gegenläufiger Richtung durchlaufen. So ergibt sich ein zeitlich besonders stabiles Interferenzbild.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Allgemeines zu Interferenz und Kohärenz

Überlagern sich zwei Lichtwellen kann es zur Interferenz kommen. Diese äußert sich in destruktiver Interferenz (Auslöschung der Welle, keine Intensität) und konstruktiver Interferenz (Addition der Wellenextrema, verstärkte Intensität). Eine wichtige Bedingung hierfür ist, dass die Wellen die gleiche Wellenlänge haben. Genauer gesagt, für eine länger andauernde, stabile Interferenz, müssen beide Wellen kohärent sein. Kohärenz beschreibt den Aspekt, dass die Wellenlänge zweier überlagernder Wellen über die Dauer der Kohärenzzeit gleich ist. Die Kohärenzzeit wiederum ist die Zeit, über die sich die Welle nicht ändert. Die Kohärenzzeit endet, sobald die Lichtquelle einen Phasensprung aussendet oder, seltener, wenn sich die Eigenschaften der Lichtwelle (Wellenlänge, Phase, etc.) der Lichtquelle ändert. Andersherum bedeutet zeitliche Kohärenz, dass bei eine ausgekoppelte Teilwelle nach einiger Zeit kohärent zur Ursprungswelle zurückgeführt werden kann. Räumliche Kohärenz liegt vor, wenn zwei ausgekoppelte Teilwellen trotz räumlicher Verschiebung miteinander interferieren können. Der Kohärenzgrad stellt die Interferenzfähigkeit zweier Wellen dar.

2.2 Polarisation

Die Polarisation einer Welle beschreibt der Auslenkungsrichtung der Wellen. Bei elliptisch polarisierten (Abb. 1, b) oder zirkular polarisierten (Abb. 1, c) Lichtwellen dreht sich die Auslenkungsrichtung um die Bewegungsrichtung. Die lineare Polarisation (Abb. 1, a) zeichnet sich durch eine gleichbleibende Auslenkungsrichtung senkrecht zu Ausbreitungsrichtung aus. Wird linear polarisiertes Licht auf eine Grenzfläche gestrahlt, wechelwirkt es dort in zwei Ausprägungen (Abb. 2). Durch eine Grenzfläche wird ausschließlich der Anteil des linear polarisierten Lichts transmittiert, der eine zur Spiegelebene parallele Auslenkungsrichtung hat und heißt entsprechend p-polarisiert. Der reflektierte Anteil des Lichts hat eine ausschließlich zur Spiegelebene senkrechte Auslenkungsrichtung und wird s-polarisiert genannt.

Interferenzen können nur bei gleich polarisierten Wellen oder gleich polarisierten Wellenanteilen entstehen, da sich die elektrischen Felder sonst nicht aufheben können. Entsprechen interferieren s-polarisiertes und p-polarisiertes Licht nicht miteinander, auch wenn beide Strahlen in der gleichen Ebene verlaufen.

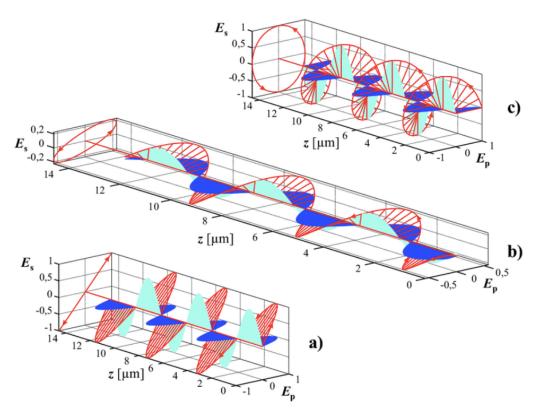


Abb. 1: Darstellungen der Polarisationsarten: Linear, zirkular und elliptisch [1].

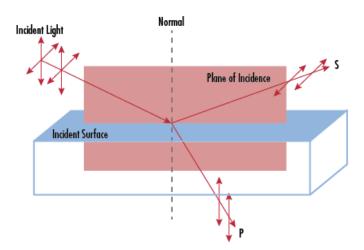


Abb. 2: Polarisation von transmittierten und reflektierten Wellen [2].

2.3 Kontrast und Intensität

Um die Qualität eines Interferenzbildes eines Interferometers anzugeben, wird der Kontrast K (auch Sichtbarkeit, eng. *visibility*) eingeführt:

$$K = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}}.$$
 (1)

Hierbei ist $I_{\rm max}$ die Intensiät eines Intensitätsmaximums des Interferenzbildes, $I_{\rm min}$ entsprechend die Intensität der Interferenz am Minimum. Die Intensität des Interferenzbildes ist über das zeitliche Mittel der elektrischen Feldstärke E vom Polarisationswinkel ϕ zwischen den Wellen abhängig. Dabei sind die interferierenden Wellen allgemein wie folgt definiert:

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_0 \cos{(\phi)} \cos{(\omega t)} \qquad \qquad \vec{E}_2 = \vec{E}_0 \sin{(\phi)} \cos{(\omega t + \delta)}.$$

 $\omega \widehat{=} \mathrm{Kreisfrequenz}, \delta \widehat{=} \mathrm{Phasenverschiebung}$

Über folgende Zwischenergebnisse der zeitlichen Mittelung über eine ganze Periode

$$\begin{split} I &\propto \langle |\vec{E}_1 + \vec{E}_2|^2 \rangle = \langle |\underbrace{E_1^2}_{I_1} + \underbrace{E_2^2}_{I_2} + \underbrace{2\,\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2}_{\text{Interferenzterm}} \, | \rangle \\ I_1 &\propto \langle E_1^2 \rangle = E_0^2 \cos^2{(\phi)} \\ I_2 &\propto \langle E_2^2 \rangle = E_0^2 \sin^2{(\phi)} \\ I_{\text{Int.}} &\propto \pm 2E_0^2 \sin{(\phi)} \cos{(\phi + \delta)} \end{split}$$

ergibt sich die Intensität eines Minimums ($\delta=n\pi,\ n\in\mathbb{Z}$) bzw. Maximums ($\delta=2n\pi,\ n\in\mathbb{Z}$) zu:

$$I_{\rm max/min} = I_1 + I_2 + I_{\rm Int.} \quad \propto I_{\rm ges} \left(1 \pm 2 \cos \left(\phi \right) \sin \left(\phi \right) \right). \label{eq:Imax/min}$$

Damit liegt dem Kontrast auch eine ϕ -Abhängigkeit zugrunde:

$$K(\phi) \propto = |2\cos(\phi)\sin(\phi)| = |\sin(2\phi)|. \tag{2}$$

2.4 Brechungsindices von Gasen und Festkörpern

Brechungsindex von Gas Ähnlich wie Gläser können auch Gase Lichtwellen brechen und reflektieren (z.B. Fata Morgana). So haben sie einen Brechungsindex, der mit dem Gasdruck und der Temperatur skaliert. Im Vergleich zu einer Lichtwelle, die durch das Vakuum läuft, ergibt sich für die Lichtwelle in Gas eine Phasenverschiebung $\Delta \delta$. Somit lässt sich bei zwei Lichtwellen, von denen eine über die Länge L durch eine evakuierte Kammer läuft und die andere über die Länge L weiter durch das Gas verläuft, die Phasenverschiebung in Abhängigkeit des Brechungsindex n des Gases ausdrücken:

$$\Delta \delta = \frac{2\pi L}{\lambda_0}(n-1).$$

 $L\widehat{=}$ Länge der Kammer, $\lambda_0=$ Vakuum-Wellenlänge, $n\widehat{=}$ Brechungsindex des Gases

Die Anzahl der Interferenzmaxima in einem Intervall verschiedener Phasenverschiebungen $\Delta \delta$ berechnet sich wie folgt:

$$M = \frac{\Delta \delta}{2\pi} \Rightarrow M = \frac{L(n-1)}{\lambda_0} \Leftrightarrow n = \frac{M\lambda_0}{L} + 1. \tag{3}$$

Der Brechungsindex ist über das Lorentz-Lorenz-Gesetz mit dem Druck und der Temperatur des Gases verbunden und kann über eine Taylorentwicklung um $n\approx 1$ wie folg genähert werden:

$$\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} = \frac{Ap}{RT} \approx \frac{2}{3}(n - 1) + \mathcal{O}(n^2) \quad \Leftrightarrow n(p) \approx \frac{3Ap}{2RT} + 1. \tag{4}$$

 $A\widehat{=} \text{Refraktivit} \\ \text{\vec{a}}, R = \text{universelle Gaskonstante}, T \widehat{=} \text{Temperatur}$

Brechungsindex von Glas Wird ein Lichtstrahl durch eine planparallele Platte geschickt, wird er zweimal um den gleichen Winkel in gegensätzliche Richungen gebrochen und behält so global seine Ausbreitungsrichtung bei, wird jedoch seitlich verschoben. Die Brechung ist abhängig vom Drehwinkel θ . Läuft ein Teilstahl durch eine planparallele Platte, und ein zweiter Teilstrahl nicht, ergibt sich eine Phasenverschiebung zwischen den beiden Strahlen:

$$\varDelta \delta = \frac{2\pi D}{\lambda_0} \left[\frac{n-1}{2n} \, \theta^2 + \mathcal{O}(\theta^4) \right].$$

 $D\widehat{=}\mathrm{Dicke}$ der Platte

Im Falle dieses Versuchs sind es zwei um konstant $\theta_0=20\,^{\circ}$ gegeneinander gekippte Glasplatten, die um den Drehwinkel θ gedreht werden. Die Interferenzmaxima über einen Winkelbereich liegen bei

$$M = \frac{\varDelta \delta}{2\pi} = \frac{D}{\lambda_0} \frac{n-1}{2n} \, \left((\theta + \frac{\theta_0}{2})^2 - (\theta - \frac{\theta_0}{2})^2 \right).$$

Nach $n(\theta)$ umgestellt ergibt sich

$$n(\theta) = \frac{1}{1 - \frac{\lambda_0 M}{\theta_0 \theta D}} \tag{5}$$

3 Aufbau und Durchführung des Versuchs

3.1 Grundsätzliches Konzept des Aufbaus

Der grundsätzliche Aufbau des Interferometers ist in Abbildung 3 dargestellt. Der Helium-Neon-Laser gibt einen monochromatischen, roten Laserstrahl mit der Wellenlänge $\lambda=632,990\,\mathrm{nm}$ [4] aus. Über zwei Spiegel wird der Strahl durch einen linearen Polarisationsfilter zum PBSC (eng. Polarising Beam Splitter Cube) umgelenkt (Abb. ??). Der PBSC (Abb. 4) ist ein Würfel, der durch eine dieelektrische Schicht diagonal

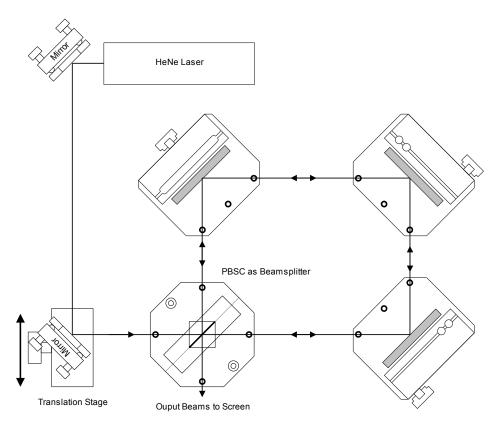


Abb. 3: Der konzeptionelle Aufbau des Interferometers [3].

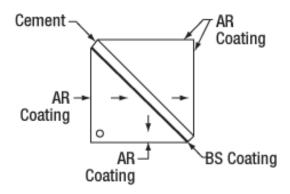


Abb. 4: Prinzip eines Polarising Beam Splitter Cube [5].

in zwei Prismen geteilt wird. Die s-polarisierte Komponente des Laserstrahls wird am Dielektrikum reflektiert, die p-polarisierte Komponente wird transmittiert.

Die polarisierten Teilstrahlen werden beim zweiten Durchgang durch den PBSC wieder zu einem Strahl vereinigt. Wird der zweite Spiegel im justierten Aufbau senkrecht zum ersten Polarisationsfilter verschoben, werden die beiden gegenläufigen Strahlen im Interferometer

durch die Geometrie des Aufbaus getrennt, laufen aber trotzdem am Ende wieder zu einem Strahl zusammen (Abb. 5). Nach dem Durchgang durch das Interferometer wird, je

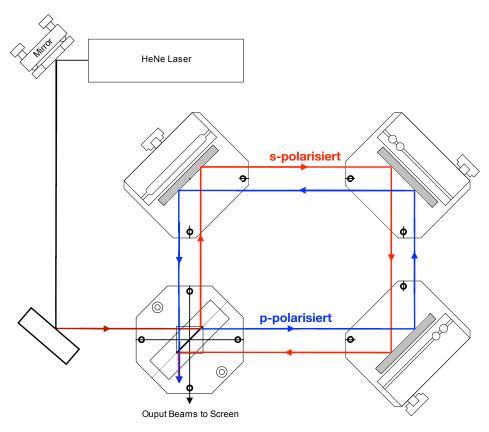


Abb. 5: Strahlengang der separierten Teilstrahlen im Sagnac-Interferometer ([3], modifiziert).

nach Messung, der Strahl direkt auf einem Schirm abgefangen, oder er läuft weiter durch einen zweiten PBSC, der beide Polarisationen erneut separiert und auf zwei Photodioden projeziert.

3.2 Durchführung und zugehöriger Aufbau der Messreihen

Justage Zur Justage wird der Strahlengang des Lasers zwischen den einzelnen Komponenten des Interferometers mit zwei Justageplatten (Platten mit Bohrung auf Höhe des Lasers) überprüft. Direkt hinter dem PBSC wird einer der beiden Teilstrahlen unterbrochen, während der Strahlengang des anderen Teilstrahls untersucht wird. Zunächst wird die Ausrichtung und Höhe der Komponenten auf der Bodenplatte angepasst und die Komponenten werden fest geschraubt, so dass der Laser die Bohrungen in etwa trifft. Anschließend wird der genauere Strahlengang verbessert, indem die Spiegel mit Justageschrauben leicht verkippt werden. Trifft der Laser genau durch die Bohrung der Justageplatte, wird der nächste Abschnitt des Strahls überprüft. So wird die Intensität

des Lasers am 'Ausgang' des Interferometers maximiert.

Nach dem PBSC wird ein zweiter Polarisationsfilter in den Strahlengang eingebaut, um die Intensitäten beider orthogonal polarisierten Teilstrahlen anzupassen. Hinter dem zweiten Polarisationsfilter wird der Laserpunkt auf einem Schirm dargestellt. Erst durch den Einbau des zweiten Polarisationsfilters ist das Interferenzmuster am Ende des Strahlengangs zu erkennen. Hier interferieren die kohärenten Anteile der Lichtwelle. Mit den Justageschrauben an den Spiegeln wird nun eine Feineinstellung vorgenommen, wobei die Linien aus dem Bild entfernt werden sollen. Nun ist das Interferometer justiert.

Kontrastmessung Der zweite Polarisationsfilter wird aus dem Strahlengang entfernt, und der Strahlengang endet in einer Photodiode, die wiederum an ein Multimeter geschlossen ist. Zur Messung des Kontrastes des Interferometers wird die Polarisation des in den PBSC eingehenden Strahls variiert. Der Polarisationsfilter wird 15°-Schritten um insgesamt 180° gedreht. Mithilfe der Glasplatten, deren Brechungsindex im späteren Versuchsablauf vermessen werden soll, werden durch Verdrehung der Platten im Strahlengang je das Minimum (I_{min}) und das Maximum (I_{max}) der Intensität gesucht und notiert. Diese Messung wird drei Mal wiederholt.

Messung des Brechungsindex von Glas Das Multimeter wird von der Diode abgekoppelt. Beide Dioden werden an ein elektronisches Zählwerk geschlossen. Dieses gibt über einen Operationsverstärker zunächst die Differenzsspannung der beiden Dioden aus. Das eigentliche Zählwerk zählt die Nulldurchgänge der Differenzsspannung. Die Glasplatten in den Teilstrahlen lassen sich um insgesamt 11° verdrehen. Bei fortlaufender Verdrehung durchläuft die Differenzsspannung mehrmals die Nulllinie. Die Nulldurchgänge werden vom Zählwerk notiert. Diese Messung wird zehn Mal wiederholt.

Messung des Brechungsindex von Luft Die Glasplatten werden aus dem Strahlengang entfernt. Eine Gaszelle wird in den Strahlengang eingebracht und mithilfe einer Pumpe evakuiert. Anschließend wird der Druck in der Zelle in 50 mbar-Schritten erhöht. Die Nulldurchgänge während des Einlassens des Gases werden mit dem Zählwerk gezählt.

4 Auswertung

4.1 Messung des Kontrasts

Zur Bestimmung des Kontrastes des Interferometers wird ein Laser mit einer Wellenlänge von $\lambda = 623.99\,\mathrm{nm}$ verwendet. Aus den in Tabelle 1 zu sehenden Werten wird der Kontrast

$$K_{\rm exp} = \frac{U_{\rm Max} - U_{\rm Min}}{U_{\rm Max} + U_{\rm Min}} \tag{6}$$

berechnet.

Tab. 1: Aufgenommene Messwerte zur Messung des Kontrastes.

$Winkel/^{\circ}$	$U_{\rm max}/{\rm mV}$	$U_{\rm min}/{\rm mV}$	Kontrast
0	1,12	0,90	0.1089108
15	2,10	0,73	0.4840989
30	2,90	$0,\!33$	0.7956656
45	$3,\!45$	$0,\!15$	0.9166666
60	2,94	$0,\!25$	0.8432601
75	1,98	0,69	0.4831460
90	$1,\!16$	0,98	0.0841121
105	$1,\!25$	$0,\!39$	0.5243902
120	1,02	0,08	0.8545454
135	0,89	0,03	0.9347826
150	$0,\!82$	$0,\!20$	0.6078431
165	0,88	$0,\!38$	0.3968254
180	1,03	0,86	0.0899470

Die daraus erhaltenen Daten werden dann, wie in Abbildung 6 zu sehen ist, an die Funktion

$$K = A \cdot |\sin(2 \cdot \phi - \delta)| \tag{7}$$

$$(A, \delta = \text{Fitparameter})$$

gefittet.

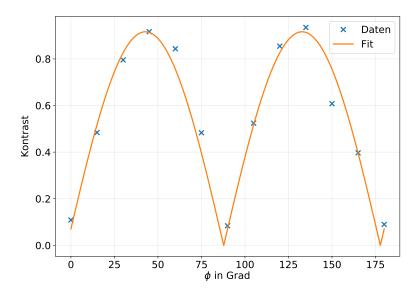


Abb. 6: Messwerte für den winkelabhängigen Verlauf des Kontrastes.

Es ergeben sich die folgenden Fit-Parameter:

$$A = -0.077 \pm 0.026 \tag{8}$$

$$\delta = 0.916 \pm 0.025 \tag{9}$$

4.2 Bestimmung des Brechungsindex von Glas

Die Bestimmung des Brechungsindex n für Glas erfolgt mit dem in Gleichung 5 aufgestellten Zusammenhang zwischen der Anzahl der Interferenzmaxima M und n. Bei einer Rotation um 11° und einer Wandstärke D=1 mm wurden die in Tabelle 2 zu sehenden Anzahl an Interferenzmaxima gemessen.

Tab. 2: Gemessene Anzahl der Maxima M für Glas

Anzahl der Maxima M			
39			
36			
37			
36			
37			
36			
37			
38			
38			
41			
Durchnschittliche Maxima			
37,5			

Damit folgt für den Brechungsindex von Glas

$$n_{\text{Glas}} = 1,549 \pm 0,011.$$
 (10)

4.3 Bestimmung des Brechungsindex von Luft

Mit der Gleichung 3 und den in Tabellen 3, 4 und 5 zu sehenden Messwerten lässt sich der Brechungsindex von Luft für jede Messreihe berechnen. Dabei beträgt die Länge der Gaszelle $L=10\,\mathrm{cm}$.

Tab. 3: Erste Messreihe zum Brechungsindex von Luft in $50~\mathrm{mbar}$ Schritten.

$\overline{Druck / \mathrm{mbar}}$	M1	n1
50	2	$1.00001266 \pm 0.00000001$
100	4	$1.00002532\ \pm0.00000003$
150	7	$1.00004431 \pm 0.00000004$
200	8	$1.00005064\ \pm0.00000005$
250	10	$1.00006330 \pm 0.00000006$
300	12	$1.00007596 \pm 0.00000008$
350	14	$1.00008862 \pm 0.00000009$
400	16	$1.00010128 \pm 0.00000010$
450	19	$1.00012027\ \pm0.00000012$
500	24	$1.00015192\ \pm0.00000015$
550	25	$1.00015825\ \pm0.00000016$
600	28	$1.00017724\ \pm0.00000018$
650	30	$1.00018990 \pm 0.00000019$
700	32	$1.00020256 \pm 0.00000020$
750	35	$1.00022155\ \pm0.00000022$
800	38	$1.00024054\ \pm0.00000024$
850	40	$1.00025320\ \pm0.00000025$
900	42	$1.00026586\ \pm0.00000027$
950	44	$1.00027852\ \pm0.00000028$
1000	46	$1.00029118\ \pm0.00000029$

Tab. 4: Zweite Messreihe zum Brechungsindex von Luft in $50~\mathrm{mbar}$ Schritten.

$\overline{Druck / \mathrm{mbar}}$	M2	n2
50	3	$1.00001899 \pm 0.00000002$
100	5	$1.00003165 \pm 0.00000003$
150	7	$1.00004431 \pm 0.00000004$
200	9	$1.00005697 \pm 0.00000006$
250	13	$1.00008229\ \pm0.00000008$
300	15	$1.00009495 \pm 0.00000009$
350	17	$1.00010761 \pm 0.00000011$
400	19	$1.00012027\ \pm0.00000012$
450	21	$1.00013293 \pm 0.00000013$
500	23	$1.00014559\ \pm0.00000015$
550	26	$1.00016458\ \pm0.00000016$
600	27	$1.00017091 \pm 0.00000017$
650	31	$1.00019623 \pm 0.00000020$
700	34	$1.00021522\ \pm0.00000022$
750	37	$1.00023421\ \pm0.00000023$
800	38	$1.00024054\ \pm0.00000024$
850	40	$1.00025320\ \pm0.00000025$
900	42	$1.00026586\ \pm0.00000027$
950	44	$1.00027852\ \pm0.00000028$
1000	47	$1.00029751\ \pm0.00000030$

Tab. 5: Dritte Messreihe zum Brechungsindex von Luft in 50 mbar Schritten.

Druck / mbar	M3	n3
50	2	$1.00001266 \pm 0.00000001$
100	4	$1.00002532\ \pm0.00000003$
150	6	$1.00003798 \pm 0.00000004$
200	12	$1.00007596 \pm 0.00000008$
250	17	$1.00010761 \pm 0.00000011$
300	19	$1.00012027\ \pm0.00000012$
350	21	$1.00013293 \pm 0.00000013$
400	23	$1.00014559 \pm 0.00000015$
450	28	$1.00017724\ \pm0.00000018$
500	28	$1.00017724\ \pm0.00000018$
550	29	$1.00018357\ \pm0.00000018$
600	32	$1.00020256 \pm 0.00000020$
650	34	$1.00021522\ \pm0.00000022$
700	36	$1.00022788 \pm 0.00000023$
750	36	$1.00022788 \pm 0.00000023$
800	41	$1.00025953\ \pm0.00000026$
850	43	$1.00027219\ \pm0.00000027$
900	47	$1.00029751\ \pm0.00000030$
950	51	$1.00032282\ \pm0.00000032$
1000	54	$1.00034181\ \pm0.00000034$

Mithilfe dieser Werte kann anschließend, wie in Abbildung 7 zu sehen, eine lineare Regression der Form

$$f(x, a, b) = a \cdot \frac{x}{T \cdot R} + b \tag{11}$$

durchgeführt werden. Dabei gehen die Temperatur $T=20,5\,^{\circ}\mathrm{C}$ und die universelle Gaskonstante R als Konstanten in den Fit ein.

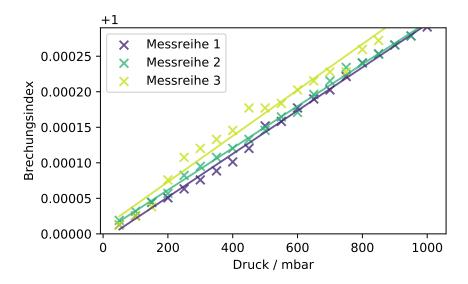


Abb. 7: Brechungsindices aufgetragen gegen den Druck.

Es ergeben sich die in Tabelle 6 zu sehenden Fitparameter. Damit ergeben sich mithilfe des

Tab. 6: Ermittelte Regressionsparameter A und B der Messung zur Bestimmung der Abhängigkeit zwischen Brechungsindex n und Druck p. Zudem ist jeweils der Wert n_{norm} zum Vergleich mit der Literatur angegeben.

Messung	$a/10^{-4}$ mbar	b
1	$7,414899744 \pm 0,10993544$	$0.99999993 \pm 0,0000027$
2	$7,192185871 \pm 0,08469601$	$1.00000269 \pm 0,0000020$
3	$7,\!876603239\ \pm0,\!24499417$	$1.00000852 \pm 0,0000060$

Lorentz-Lorenz Gesetz bei einem Druck von $p = 1013 \,\mathrm{mbar}$ folgende Brechungsindices:

$$n(20.5 \,^{\circ}\text{C})_1 = 1.00029910 \pm 0,00000530$$
 (12)

$$n(20.5 \,^{\circ}\text{C})_2 = 1.00030161 \pm 0,00000408$$
 (13)

$$n(20.5 \,^{\circ}\text{C})_3 = 1.00033588 \pm 0,00001182$$
 (14)

Eine Mittelung über alle Werte ergibt folglich:

$$n(20.5 \,^{\circ}\text{C}) = 1.000312 \pm 0.000005$$
 (15)

Mithilfe von Gleichung (11) werden daraufhin die Brechungsindices für $T=15\,^{\circ}\mathrm{C}$ und $p=1013\,\mathrm{mbar}$ berechnet:

$$n(15\,^{\circ}\text{C})_1 = 1,00030555 \pm 0,00000539$$
 (16)

$$n(15\,^{\circ}\text{C})_2 = 1.00030786 \pm 0,00000415$$
 (17)

$$n(15 \,^{\circ}\text{C})_3 = 1.00034273 \pm 0,00001201$$
 (18)

Eine Mittelung über diese Werte ergibt:

$$n(15\,^{\circ}\text{C}) = 1.000319 \pm 0.000005$$
 (19)

5 Diskussion

In Abbilung 6 ist eine $|\sin(2\phi)|$ - Abhängigkeit deutlich zu erkennen. Dabei liegen auch alle Messwerte nahe der Kurve. Zusätzlich sind auch die erwarteten Maxima bei 45° und 130° deutlich zu erkennen.

Die Untersuchung des Brechungsindexes für Glas ergab einen Brechungsindex von

$$n_{\text{Glas}} = (1,549 \pm 0,011).$$
 (20)

Dies entspricht einer Abweichung von 3,26% vom Literaturwert von $n_{\rm Glas}=1,5$ und liegt somit innerhalb der Messungenauigkeiten.

Dagegen liegt der berechnete Brechungsindex von Luft mit $T=15\,^{\circ}\mathrm{C}$

$$\bar{n}_{\text{Luft}} = (1,000\,319 \pm 0,000\,005)\,.$$
 (21)

Im Vergleich zum Literaturwert von $n_{\rm Luft}=1,000272$ [6] weichen die Nachkommastellen um 19,3% ab. Dieseses Ergebnis liegt somit leicht außerhalb der Messungenauigkeiten. Dafür kann es mehrere Ursachen geben. Zu einem ist diese Abweichung durch einen defekten oder unpassend eingestellten Zähler zu erklären, da bereits während der Messung in einigen Fällen die Anzahl der gemessenen Maxima bei konstanten Druck schlagartig stieg. Zum anderem sind eventuelle Verunreinigungen innerhalb der Röhre nicht auszuschließen.

Literatur

- [1] M. Buskühl. "Infrarotellipsometrische Untersuchungen zur Oberfla"chenversta"rkten Infrarotabsorption. SEIRA Surface Enhanced Infrared Absorption". Dissertation. Humboldt-Universität zu Berlin, 2003.
- [2] Edmund Optics. Introduction to Polarization. 2018. URL: https://www.edmundoptics.de/knowledge-center/application-notes/optics/introduction-to-polarization/.
- [3] Inc. TeachSpin. TeachSpin's Modern Interferometry. A Conceptual Introduction to the Experiment. 2017. URL: https://drive.google.com/file/d/0B1nZP55TUGJMN1VyUWhFT0tnVDg/view,%20https://www.teachspin.com/modern-interferometry.
- [4] TU Dortmund. In: Versuchsanleitung V64 Moderne Interferometrie.
- [5] Inc. Thorlabs. Broadband Polarizing Beamsplitter Cubes. 2020. URL: https://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=739.
- [6] Dr. Daniel Lingenhöhl. <u>Brechzahl</u>. URL: https://www.spektrum.de/lexikon/physik/brechzahl/1958.